

5М4.110.001 РЭ

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Штатив лабораторный ШЛ-96 упакован Открытым акционерным обществом "Ратон" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штатив лабораторный ШЛ-96 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие штатива требованиям настоящего документа 5М4.110.001 ПМ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации штатива – 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.

Адрес для предъявления претензий и рекламаций:

Открытое акционерное общество "Ратон"

246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19



ЗАКАЗАТЬ

Открытое акционерное общество
"Ратон"



ШТАТИВ ЛАБОРАТОРНЫЙ ШЛ-96

Руководство по эксплуатации

5М4.110.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом действия, техническими характеристиками штатива лабораторного ШЛ-96 (далее - штатив) и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, технического обслуживания.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Штатив предназначен для установки и крепления ионометрических измерительных и вспомогательных электродов, термокомпенсаторов и термометров.

1.2 Штатив рекомендуется применять в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений, в различных отраслях народного хозяйства в комплекте с ионометрическими приборами при проведении анализов водных растворов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Кронштейн с установленными в нем необходимыми объектами должен свободно перемещаться, устанавливаться и фиксироваться в рабочем положении.

2.2. Держатель штатива должен быть пятиместным (одновременная установка пяти сменных держателей для электродов). Номинальные значения диаметров установочных отверстий держателей электродов должны соответствовать ряду: 6; 7,5; 8; 8,5; 11; 11,5; 12 мм.

2.3 Диаметр горловины посуды для раствора, устанавливаемой на штатив при измерениях, должен быть не менее:

- 40 мм – при установке в держатель двух электродов и термокомпенсатора;

- 50 мм – при установке электродов и термокомпенсатора.

2.4 Габаритные размеры штатива (L x B x H) должны быть не более:

- основание – 150 x 150 мм;

- максимальная высота – 450 мм.

2.5 Масса штатива не более 2,5 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки штатива в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Штатив лабораторный		1
Сменные держатели электродов		
- Ø 6 мм	5М8.128.063-05	2
- Ø 7,5 мм	5М8.128.063-06	2
- Ø 8 мм	5М8.128.063-04	1
- Ø 8,5 мм	5М8.128.063-03	2
- Ø 11 мм	5М8.128.063-02	1
- Ø 11,5 мм	5М8.128.063-01	2
- Ø 12 мм	5М8.128.063	1
Потребительская тара		1
Руководство по эксплуатации	5М4.110.001 РЭ	1

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации штатива соблюдать следующие меры предосторожности:


- штатив должен использоваться строго в соответствии со своим назначением;

- в процессе эксплуатации штатива избегать его опрокидывания или падения.

4.2 Штатив при правильной эксплуатации безопасен для жизни и здоровья потребителя и экологически безвреден для окружающей среды.

5 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Внешний вид штатива представлен на рисунке 1.

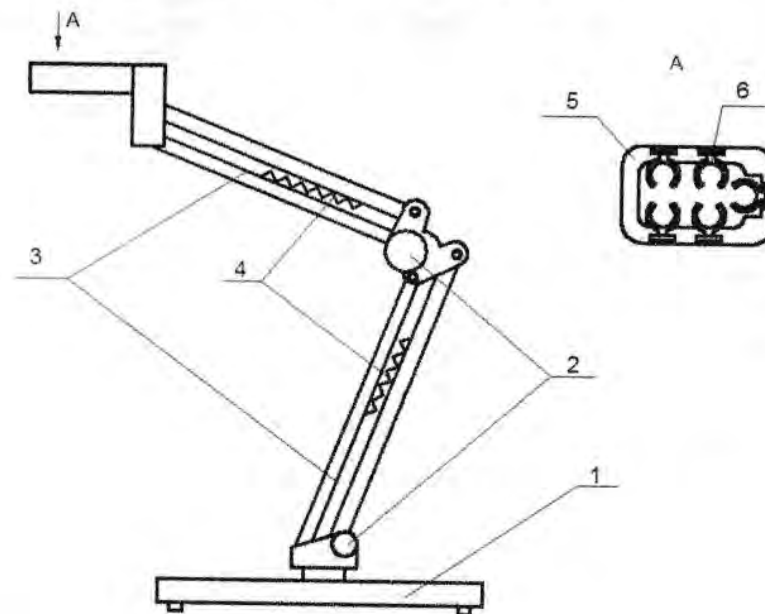

1 – основание; 2 – ручка; 3 – рычаг; 4 – пружина; 5 – кронштейн;
6 – держатель электрода

Рисунок 1 – Внешний вид штатива ШЛ-96

5.2 Собрать штатив в соответствии с рисунком 1 в следующей последовательности:

- рычажную систему 3 установить на ось основания 1;
- в держатели 6 установить электроды соответствующего диаметра;
- кабели электродов для фиксации завести в пазы на рычагах;
- регулировка перемещения рычажной системы осуществляется ручками 2.